


tria<sup>®</sup>

ACNERY CLEARING BLUE LIGHT

クイックスタートガイド

## アクネリークリアブルーライトについて

アクネリークリアブルーライトは、プロ仕様のブルーライトを使用した美容機器です。

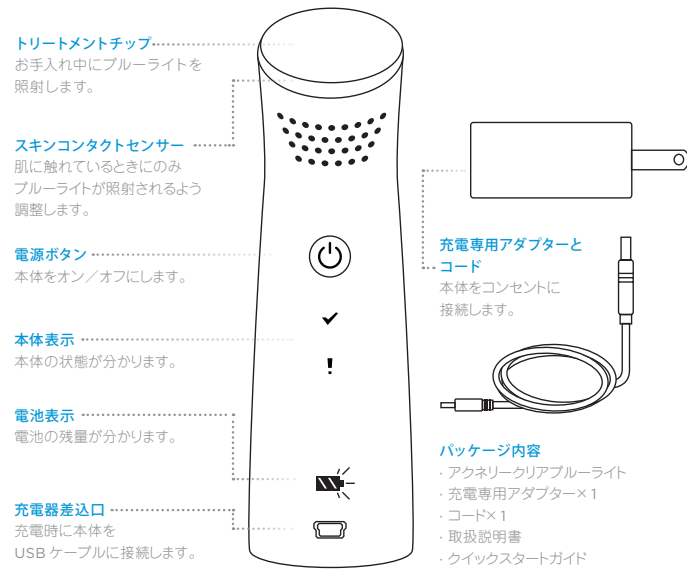

## 本体の重要な表示



### お手入れ完了表示

選択部位のお手入れが完了(5分)すると点灯します。音が鳴り本体が自動的にオフになります。



### エラー表示

エラーが発生すると点灯し、ブザー音が鳴ります。



### 電池表示

電池残量が少なくなると、電池表示が点滅します。充電が必要です。本体をコンセントに差し込んで充電している間は、充電中の表示が出ます。



### 満充電表示

満充電の表示(3本のバー)は、完全に充電され使用可能な状態になったことを示します。

トリア・ビューティお客様サポートセンター  
customercafe\_jp@triabeauty.com  
0120-917-380

tria.

取扱説明書をご確認いただき、詳しい使用方法と安全性に関する重要事項をお読みください。

無断複写・転載を禁じます。トリア、トリア・ビューティ、およびロゴについては、特許によって保護されています。詳しくはtriabeauty.com/legalからご確認ください



16898A

# お手入れを始める

## はじめてお使いになる前に


取扱説明書をご確認いただき、詳しい使用方法と安全性に関する重要事項をお読みください。

## 本体を充電する

充電中の表示が消え満充電の表示が出るまで、本体を充電してください（約6時間）。  
本体が満充電の状態でお客様の元に届き、初回使用時に充電の必要がない場合もあります。

## 使用方法

お手入れを1日（24時間ごとに）1回継続的に行うことで効果を発揮します。  
使用したい部分を洗浄し、乾かしてから始めてください。

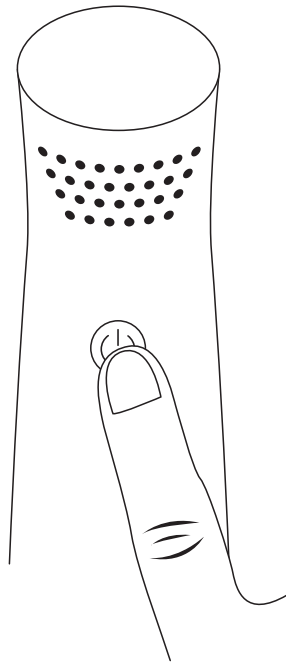

## 1 本体をオンにする

電源ボタンを押して指を離してから、本体をお肌に当ててください。ピーという音がして使用を開始することができます。

**注意：**本体がコンセントに差し込まれていると作動しません。本体を肌に当ててから本体をオンにしても使用できません。本体をコンセントから抜いて電源をオンにしたことを確認してから、本体を肌に当ててください。

## 2 お手入れを開始する

使用部位にトリートメントチップを当てます。


トリートメントチップを使用部位に当てたまま5分間絶えず均等に動かしてください。

ブルーライトが照射されている間はファンの音が聞こえます。

選択した部位のお手入れが完了すると、音が鳴り、お手入れ完了表示（✓）が点灯し、本体が自動的にオフになります。

必要に応じて他の部位にもお使いください。

**注意：**本体を肌から離すとブルーライトの照射が停止しファンが止まります。トリートメントチップをお肌に戻すと、お手入れを継続できます。

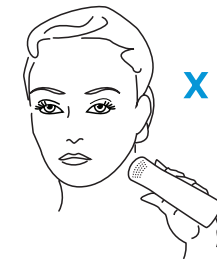

✕ 間違っやり方  
肌から離している



✓ 正しいやり方  
肌に密着した状態で  
動かしている

## 滑らかなお肌へのお手入れをグレードアップします

トリアアクネリークリアブルーライト用のスキンケア製品を合わせてお使いいただくことで、より効率よくお手入れを行うことができます。

トリア・ビューティのスキンケア製品の詳細については、トリア・ビューティ公式サイトをご覧ください。