

トリア・ビューティお客様サポートセンター

0120-917-380
info@triabeauty.co.jp
triabeauty.co.jp

tria.

©2013 Tria Beauty, Inc. All rights reserved.
トリア、トリア・ビューティ、トリアのロゴはトリア・ビューティの登録商標です


お手入れガイド

前回の位置と一部重なる形でお手入れしたい箇所をすべて網羅するまで照射します。

このガイドは、出力レベル「中」の場合何分ほどお手入れが必要かを示す例としてご利用ください。お手入れ時間は「低」のときは短く、「高」の時ほど長くなります。

取扱説明書のお手入れガイドや警告には常に従ってください。

- 1回の充電ごとの使用可能時間は15～20分です。複数の箇所をお手入れする場合は再度充電が必要な場合があります。
- 顔へは鼻から下のみ使用可能です。

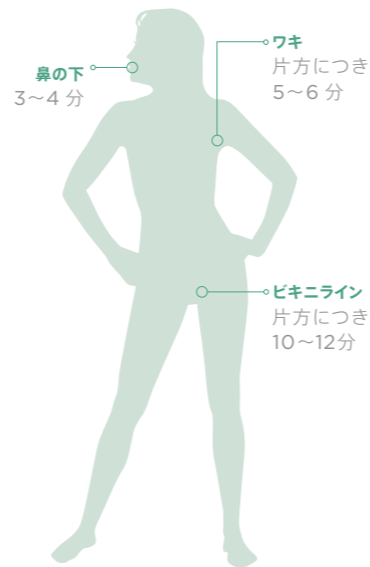

お手入れ対象箇所

トリア・レーザープレジジョンは、ワキの下やビキニラインなど、狭く敏感な箇所のお手入れに適した設計。終わりのないカミソリやワックスによるお手入れや肌荒れにはもうさようなら!これからはシルクのようなスベスベ肌に。

お肌の色をチェック

トリア・レーザープレジジョンは、肌の色が白からライトブラウン。体毛の色がライトブラウンから黒の場合に使用できるように設計されています。髪の色が白、グレー、ブロンド、赤毛の場合は機能しません。お肌の色がお手入れに「使用できない肌の色」の対象になっていた場合は、トリア・レーザープレジジョンを使用しないでください。

スキントーンチャート

使用できる肌の色:



使用できない肌の色:



tria.[®]


HAIR REMOVAL LASER

PRECISION

クイックスタートガイド



トリア・パーソナルレーザー脱毛器プレジジョンについて 知っておきましょう

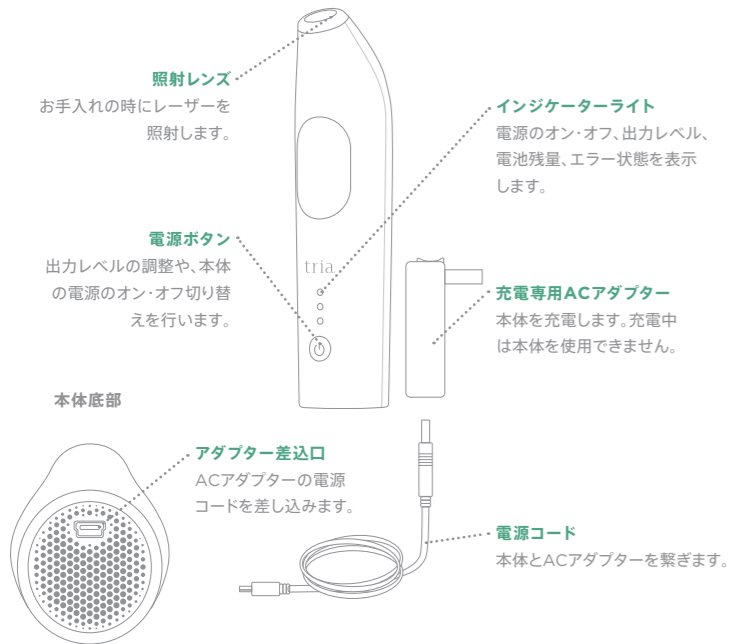

初めてのお手入れの前に

お手入れの前に、取扱説明書を全文お読みになり、詳しい使い方や重要な警告をご覧ください。

充電する：トリア・レーザープレジジョンを初めてご使用になるときの電池の残量がゼロになったときには、少なくとも2時間本体を充電する必要があります。1回の充電ごとの使用可能時間は15～20分です。

お手入れの方法

お手入れの前に、お手入れしたい箇所のムダ毛を剃り、きれいに洗い、水気を拭き取ってください。初めてご使用になる箇所には、本格的にお手入れを開始する前にその箇所でもパッチテストを行ってください。お手入れは2週間後ごとに3ヶ月ほど、または結果に満足するまで繰り返してください。

1 電源を入れる

本体を電源コードから取り外し、電源ボタンを押します。





2 出力レベルを設定する

電源ボタンを押してレベルを設定します。我慢できる一番高いレベルが、あなたにとって最適なレベルです。臨床試験によると、出力レベルが高いと2-3倍の効果があるという結果が出ています。



3 照射する。ブザーが1回鳴るまで照射レンズを当てる。

照射レンズを肌に当て、「ピッ」音が鳴るまで押さえます。それから本体を持ち上げてレーザーを5mmほど移動させ、前回の位置と重なるような形で照射レンズをまた肌に当てます。

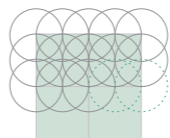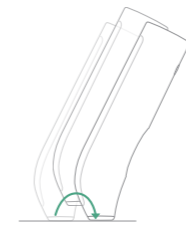

注：お手入れが進むにつれて「ピッ」音の間隔が長くなるのは普通のことです。お手入れの結果には影響ありません。

出力レベル表示

